



## **Desembalando - Montagem - Preparação e Uso**

O Sistema de Higiene Pessoal Beauty Bath é um acessório para fornecer uma limpeza corporal sem água quando a mobilidade ou as instalações de banho não permitem uma limpeza normal da banheira ou do chuveiro de pé.

O Sistema de Higiene Pessoal Beauty Bath combina quatro (4) componentes:

1. um recipiente para conter sabão de limpeza suficiente, sem água, sem enxágue para uma lavagem corporal completa.
2. uma base de aquecimento que aquece a temperatura do sabonete de limpeza para um seguro e confortável 50°C (110°F).
3. uma mangueira para transferir o sabão quente do recipiente de armazenamento de vidro para um (4.) Spray Elétrico/bico de pulverização que direciona um jato quente de sabão líquido sobre a pele ou o cabelo para que você possa lavar a sujeira.

Por favor, leia este manual antes de usar o Sistema de Higiene Pessoal Beauty Bath, pois este Manual do Usuário contém informações importantes

informações para garantir a segurança e integridade do paciente, do usuário e do equipamento. Recomendamos manter este manual próximo ao dispositivo para referência futura.

---

A BEAUTY BATH não se responsabiliza por quaisquer danos pessoais, danos materiais ou perdas ou danos ao dispositivo ou a qualquer um dos seus componentes, descartáveis ou produtos de terceiros utilizados devido a montagem inadequada, uso inadequado, falta de manutenção ou modificações não autorizadas. Nenhuma outra garantia ou garantia é dada ou implícita, exceto aquelas expressamente indicadas neste Manual do Usuário.


## Primeiros Passos

Reserve um momento para inspecionar o exterior da caixa de varejo para qualquer dano óbvio e significativo, como furos, cortes ou cantos danificados ou para uma caixa pré-aberta. Se algum dano for descoberto, tire fotos para enviar ao seu revendedor local da Beauty Bath ou diretamente à Beauty Bath LLC.


Abra a caixa e remova os componentes e coloque-os em uma superfície plana, como uma mesa, cama, etc. Inspeccione cada componente quanto a danos óbvios, como quebra ou defeitos de fabricação. Se algum dano for descoberto, tire fotos para enviar ao seu revendedor local da Beauty Bath ou diretamente à Beauty Bath LLC.

---

**Monte a tampa da mangueira:** Segurando a tampa da mangueira de componente único em sua mão, vire a tampa de cabeça para baixo e conecte a mangueira curta. *A mangueira terá um filtro ligeiramente maior na parte inferior da mangueira e a mangueira simples na outra extremidade.* Prenda a extremidade lisa da mangueira ao poste da mangueira na parte inferior interna da tampa e empurre-a no poste da mangueira até que esteja firmemente no lugar.

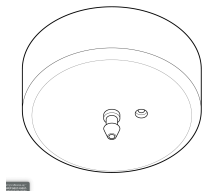

Depois de encaixar a mangueira, vire a tampa para cima.

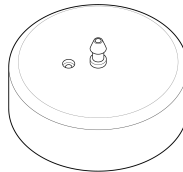

Limpe a mangueira com um pano limpo ou com álcool para remover qualquer sujeira ou contaminação restante.



## Montando a base de aquecimento e a garrafa de armazenamento de vidro

Remova quaisquer embalagens residuais da base de aquecimento e do frasco de armazenamento de vidro. Limpe a parte inferior interna da base de aquecimento com um pano úmido ou com álcool para remover qualquer sujeira ou contaminantes remanescentes


Limpe o interior do frasco de armazenamento de vidro com um pano limpo úmido ou com álcool para remover qualquer sujeira ou contaminantes remanescentes. e bactérias.

A garrafa de vidro tem duas extremidades abertas, uma das extremidades é maior que a outra. Olhe atentamente para identificar qual extremidade tem a abertura maior. *Coloque a abertura maior do frasco de armazenamento de vidro na base de aquecimento e gire no sentido horário para conecta-los.*

Aperte até ficar seguro, mas **NÃO APERTE DEMAIS**, pois corre o risco de rachar ou quebrar o vidro. Se a junta vazar quando estiver cheia de líquido, o vidro pode ser girado suavemente no sentido horário para vedar melhor o fundo da garrafa de vidro à vedação na base

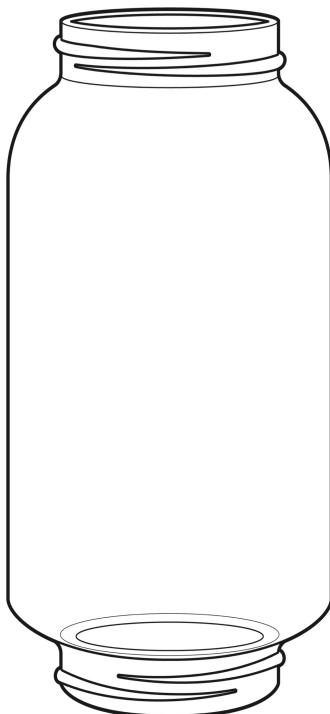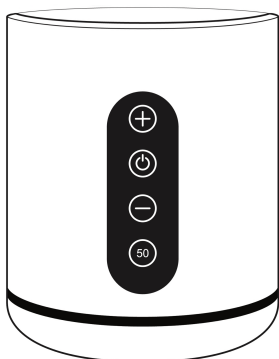

Com a garrafa de armazenamento de vidro e a base de aquecimento segura, você pode prender a tampa da mangueira. Uma montagem devidamente concluída ficará assim.

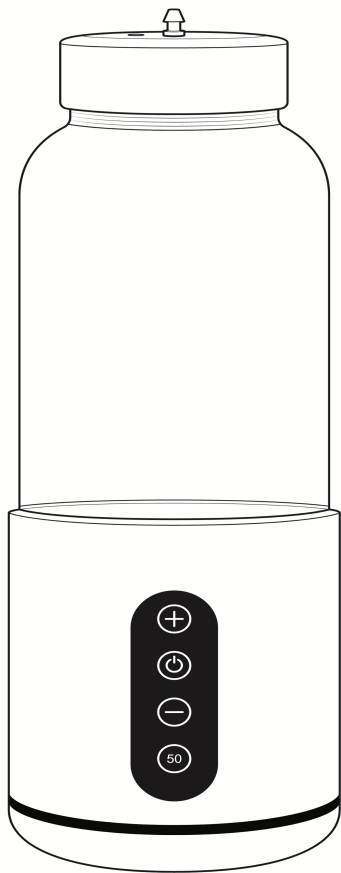

Tampa para Mangueira

Garrafa/Frasco de Vidro

Base de Aquecimento

Remova a tampa da mangueira, encha a garrafa de vidro com água até 70%, recoloque a tampa da mangueira e agite a garrafa suavemente para verificar se há vazamentos. Conecte suavemente o frasco de vidro e a base de aquecimento para vedar quaisquer vazamentos.

# Montagem Final

O spray elétrico já terá uma mangueira conectada à parte inferior da alça. Não tente remover a mangueira neste local, pois ela foi fixada permanentemente na fábrica.

***Prenda a extremidade solta da mangueira do spray elétrico ao encaixe da mangueira na parte superior da tampa da mangueira no frasco de vidro***



O sistema está agora completamente montado e pronto para uso.

# INÍCIO RÁPIDO - OPERAÇÃO


Dois componentes do sistema possuem controles operacionais integrados - a base de aquecimento e o spray elétrico.

## **Base de Aquecimento:**

1.Pressione o botão Ligar/Desligar para ligar a alimentação da base de aquecimento. O volume atual da bateria aparecerá na tela inferior

2.Pressione o botão + ou - para aumentar ou diminuir a temperatura desejada para o agente de limpeza ( sabão ).

3.Quando a temperatura desejada do agente de limpeza (sabão) for alcançada, o circuito de aquecimento será desligado automaticamente e a temperatura do líquido será exibida na tela do visor.

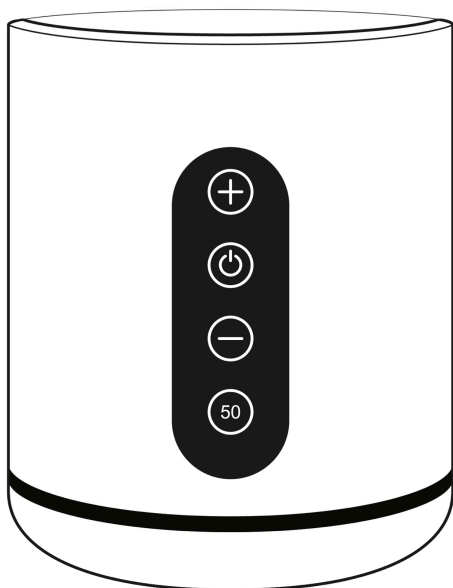

Pressione + botão para aumentar a temperatura desejada

## **Botão Ligar / Desligar**

Pressione o botão - para diminuir a temperatura desejada

**Uma tomada de carregamento USB está localizada na parte traseira da base de aquecimento**

# Spray Eléctrico

1. Pressione o botão liga/desliga na parte traseira do alojamento do bico para ligar o bico do spray elétrico.
2. Puxe o gatilho e solte para INICIAR a pulverização.
3. Puxe o gatilho e solte para PARAR a pulverização.
4. Conecte a extremidade solta da mangueira ao encaixe da mangueira superior na tampa da mangueira, na base aquecedora.



# CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS

**CUIDADO:** Não encha demais a garrafa de vidro. 80% é o suficiente, porque o líquido se expandirá à medida que aquece e o volume expandido pode fazer com que a garrafa transborde se não houver espaço na garrafa de vidro para expansão.

**AVISO:** Ao recarregar a base de aquecimento e o bico de pulverização, certifique-se de usar apenas tomadas elétricas aterradas. **NÃO** recarregue ou deixe os dispositivos conectados a uma tomada elétrica ao manusear líquidos, pois pode ocorrer um curto-circuito e causar choque elétrico ao atendente ou paciente.

**ADVERTÊNCIA:** É essencial limpar o frasco de vidro e a base após cada uso único ou ao final de cada dia para evitar possível contaminação dos dispositivos e dos agentes de limpeza e sabões.

**AVISO:** É melhor limpar o frasco de vidro e a base de aquecimento antes de usar, pois pode ter ocorrido contaminação intencional ou acidental enquanto os dispositivos estavam armazenados. Um sabão neutro e enxaguar ou limpar com um pano com álcool são os métodos de limpeza recomendados.

**CUIDADO:** Se um produto cair em um piso duro ou superfície semelhante, é melhor parar de usar esse dispositivo até que ele possa ser examinado quanto a danos.

**AVISO:** Dependendo do local e da temperatura ambiente onde será feito o banho, os tempos de aquecimento para a base de aquecimento e agentes de limpeza podem variar muito. Considere o seu ambiente e dê tempo para o aquecimento adequado dos agentes de limpeza ou sabonetes.

**AVISO:** O seu distribuidor local do Beauty Bath ou o acesso ao Beauty Bath LLC estão disponíveis se você tiver alguma dúvida sobre o uso do Beauty Bath Sistema de higiene pessoal ou componentes do dispositivo; ou se os reparos ou substituições forem apropriados.

**AVISO:** O banho adequado é uma parte essencial da boa saúde. Banhos frequentes e adequados são recomendados e algo que deve ser discutido com seu médico ou profissional de saúde.